

Urgo hydrogel®



Hydrogel pour la détersion des plaies
nécrotiques sèches


www.distrimed.com

Urgo hydrogel®

Tubes unidoses stériles conditionnés en boîte

CODE	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPE Nombre	
		UCD	boîte
1545	10 tubes de 15 grammes	100	10

Urgo hydrogel®

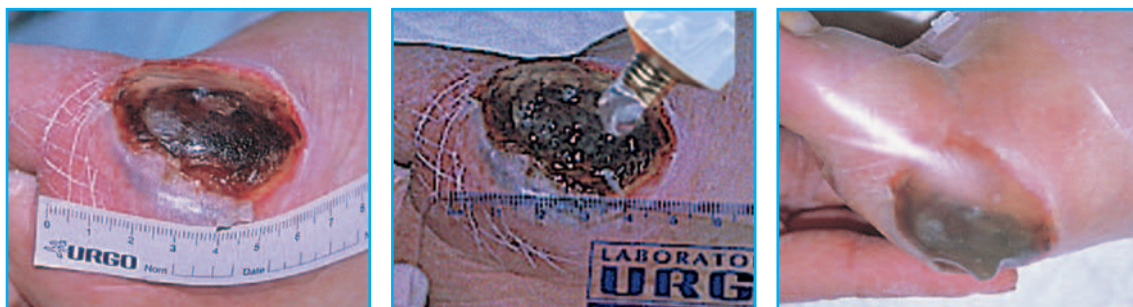

DESCRIPTION

COMPOSITION : Gel stérile amorphe, clair et visqueux, constitué d'un polymère d'origine naturelle, polysaccharidique, dispersé en phase aqueuse.

- Gomme de Guar (galactomannane hautement hydrophile).
- Propylène Glycol (agent humectant).
- Eau purifiée (80 %).

PRESENTATION : Tubes unitaires stériles de 15 g de gel, à usage unique.

MODE DE STERILISATION : Par Autoclavage.

PROPRIETES

- **Urgo hydrogel®** est un gel d'hydratation des plaies nécrotiques sèches nécessitant un ramollissement continu pour accélérer le processus naturel de détertion autolytique.
- Au contact de la plaque de nécrose, **Urgo hydrogel®** se comporte comme un donneur d'eau depuis sa matrice polysaccharidique vers le tissu nécrosé.
- L'utilisation d'**Urgo hydrogel®** sous pansement occlusif (Algoplaque Film®) évite au gel de se déshydrater en superficie et renforce ses propriétés hydratantes.
- Grâce à sa haute viscosité (> 100 000 centipoises), **Urgo hydrogel®** reste cohésif lors de son application et ne coule pas, même sur plaie déclive.

INDICATIONS

- Plaque de nécrose sèche.
- Débris fibrino-nécrotiques adhérents.
- Plaies atones sèches en attente de bourgeonnement.

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- L'apparition ou la suspicion d'une surinfection sous la plaque de nécrose contre-indique la poursuite du traitement sous pansement occlusif.
- L'élimination progressive des déchets nécrotiques s'accompagne d'une augmentation de la plaie en profondeur. Ce phénomène est normal jusqu'à totale disparition de la nécrose.

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer **Urgo hydrogel®** sur toute la surface de la plaie d'une fine couche de 4-5 mm d'épaisseur en veillant à ce que le gel ne déborde pas en peau saine.
- Recouvrir d'un pansement secondaire Algoplaque Film® avec un débord de 3 à 4 cm de chaque côté.
- Renouveler l'application tous les trois jours en moyenne après ablation des débris nécrotiques ramollis.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

www.distrimed.com

